

Thuis met **Lecigon®**

INHOUD

Starten met Lecigon	5
Over Lecigon	6
Over LecigonSupport	11
Test- & instelperiode	12
PEG-J verzorging	14
Problemen & oplossingen PEG-J sonde	16
De Crono® LECIG-pomp	17
Reizen	27
Problemen & oplossingen Crono® LECIG-pomp	28
Vragen & antwoorden	29

Starten met Lecigon

Samen met uw arts heeft u besloten te starten met Lecigon. In deze brochure vindt u informatie over wat dit geneesmiddel en het ondersteunende zorgprogramma LecigonSupport voor u kunnen betekenen. Ook vindt u in deze brochure meer informatie over de start van de behandeling in het ziekenhuis, het thuis gebruiken van Lecigon, de PEG-J sonde en welke ondersteuning u van LecigonSupport krijgt, wanneer u weer thuis bent.

LecigonSupport 24-uurservice:

☎ 0800-0200300

@ lecigon@eurocept.nl

Ga naar www.lecigonsupport.nl

voor meer informatie over Lecigon, de pomp en LecigonSupport. Door de code '1357' in te voeren bij zowel 'gebruikersnaam' als 'wachtwoord', kunt u inloggen op het patiëntendeel van deze website.

Over Lecigon

Waarom Lecigon?

Mensen met de ziekte van Parkinson hebben te weinig dopamine in de hersenen. Levodopa wordt in de hersenen omgezet in dopamine. Door tabletten met levodopa in te nemen, wordt dopamine in de hersenen aangevuld. Bij de ziekte van Parkinson kunnen op termijn problemen ontstaan bij het leegmaken van de maag. Hierdoor kan levodopa dat via de mond wordt ingenomen, minder regelmatig in het bloed komen. Als levodopa minder goed door het lichaam wordt opgenomen, kunnen er schommelingen van de hoeveelheid dopamine in de hersenen ontstaan.

Deze schommelingen van dopamine kunnen zorgen voor 'ON- en OFF-momenten'. Wanneer de behandeling met tabletten onvoldoende effectief is of bijwerkingen geeft, (zoals 'ON-OFF-momenten') kan gekozen worden voor Lecigon.

Wat is Lecigon en hoe werkt het?


Lecigon wordt voorgeschreven als de ziekte gevorderd is en als medicijnen die via de mond (oraal) worden ingenomen niet langer goed werken. Het is een gel, bestaande uit levodopa, carbidopa en entacapon. Dit zijn (deels) dezelfde werkzame stoffen als in uw tabletten, alleen worden deze op een andere manier toegediend. Dit betekent dat levodopa, carbidopa en entacapon in vloeibare vorm direct in de dunne darm worden afgegeven via een sonde (slangetje). Deze sonde wordt een PEG-J sonde genoemd. Dit slangetje gaat door de buikwand en door de maag en eindigt in de dunne darm. Omdat bij deze behandeling het geneesmiddel direct in de dunne darm komt, zijn er minder problemen met de opname in het bloed. Bovendien wordt het geneesmiddel de gehele dag via de pomp toegediend, waardoor er minder schommelingen van dopamine zullen zijn. Dit zorgt mogelijk voor minder ON- en OFF-momenten.

De pomp en de cassette

Lecigon zit in een cassette die gekoppeld is aan De Crono® LECIG-pomp. Dankzij deze pomp kan het geneesmiddel continu en gelijkmatig worden afgegeven. Meer informatie over de pomp en het gebruik ervan vindt u in het hoofdstuk 'De Crono® LECIG-pomp'.

Een cassette van 47 ml bevat 940 mg levodopa (20 mg/ml), 235 mg carbidopamonohydraat (5 mg/ml) en 940 mg entacapon (20 mg/ml).

De behandeling wordt in de meeste gevallen gedurende 16 uur gegeven, echter in bepaalde gevallen kan besloten worden om voor 24-uurs toediening te kiezen. Volg altijd het advies van uw behandelaar en lees voor gebruik altijd de bijsluiter.

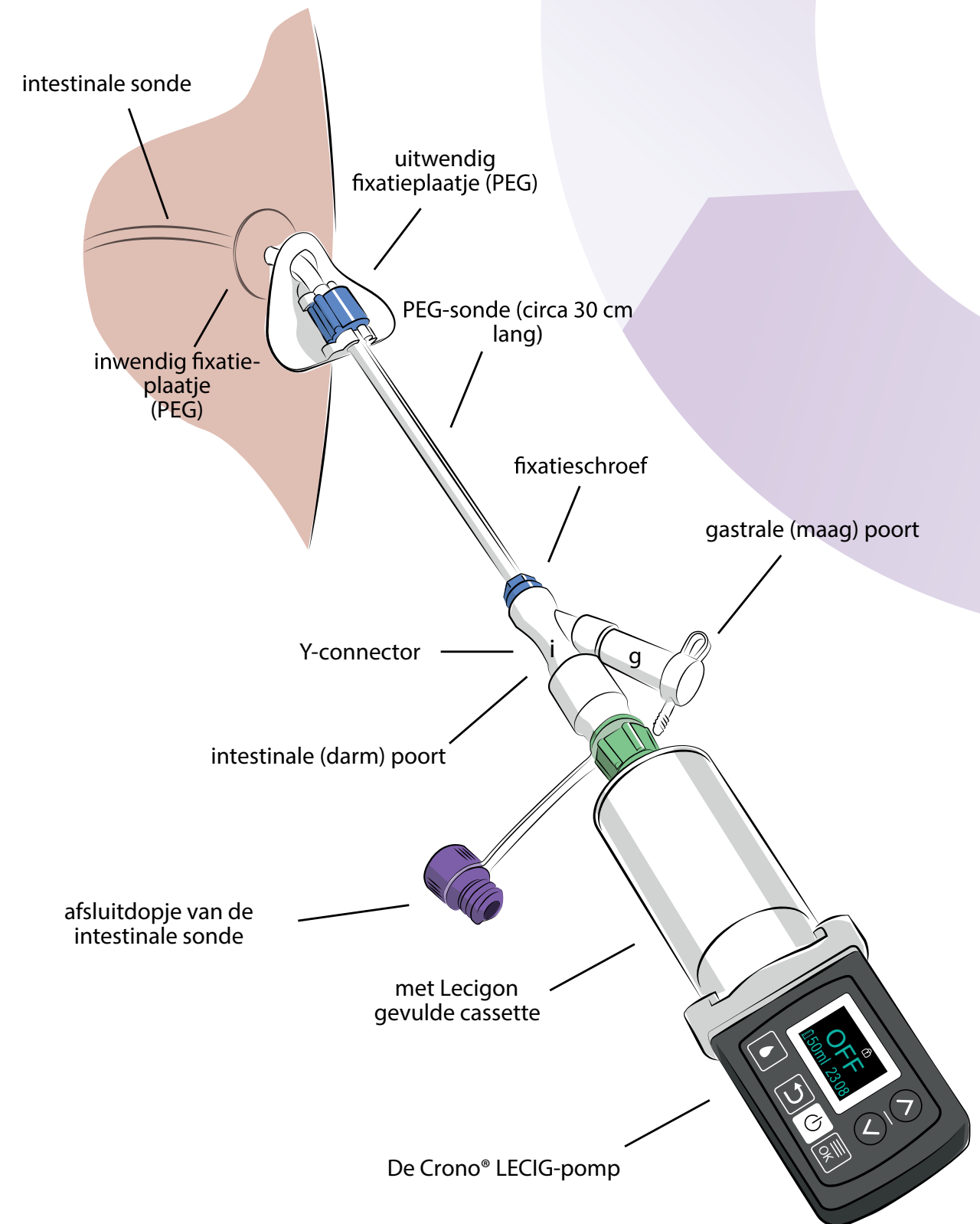

PEG-J sonde en pomp

Mogelijke bijwerkingen

Bij ieder geneesmiddel kunnen bijwerkingen optreden. Een volledig overzicht van bijwerkingen kunt u in de bijsluiter vinden. De meest voorkomende bijwerkingen kunnen zijn:

Van het medicijn
Gewichtsverlies
Angst, depressie, slapeloosheid
Bewegen zonder het te willen (dyskinesie)
Verergering van klachten van de ziekte van Parkinson
Duizelig zijn bij het opstaan of veranderen van houding (orthostatische hypotensie) Dit komt door een lage bloeddruk
Misselijkheid, verstopping (obstipatie), diarree
Spierpijn, pijn in de weefsels en pijn aan uw botten
Ongewone kleur van de urine (chromaturie)
Kans op vallen

Van de pomp, het buisje of de operatie
Buikpijn
Ontsteking van de wond na de operatie
Dikke littekens op de plek waar het buisje in het lichaam gaat
Problemen bij het inbrengen van het buisje, zoals pijn of zwelling in de mond of keel, moeite met slikken, een vervelend gevoel in de maag, pijn of zwelling, schade aan de keel, mond of maag, inwendige bloeding, braken (overgeven), gezwollen buik, angst
Problemen op de plek waar het buisje in het lichaam gaat, rode kleur van de huid, zweren, een stoma die lekt, pijn of prikkend gevoel

Raadpleeg de bijsluiter voor volledige informatie over mogelijke bijwerkingen.

Meld bijwerkingen bij het Nederlands Bijwerkingencentrum Lareb

Neem contact op met uw arts als u last krijgt van bijwerkingen. Doe dit ook bij bijwerkingen die niet in de bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen melden via het Nederlands Bijwerkingencentrum Lareb, website: www.lareb.nl. Door bijwerkingen te melden helpt u ons aan meer informatie over de veiligheid van dit medicijn.

Wanneer mag u dit medicijn niet gebruiken?

In sommige gevallen mag Lecigon niet worden gebruikt. De volledige informatie is te vinden in de bijsluiter.

Wanneer mag u dit medicijn niet gebruiken
U bent allergisch voor levodopa, carbidopa, entacapon of een van de andere stoffen in dit medicijn
U heeft een oogziekte die ‘nauwekamerhoekglaucoom’ wordt genoemd
U heeft erg hartfalen
U heeft erge hartritmestoornissen
U heeft kortgeleden een beroerte gehad
U heeft een erge ziekte van de lever
U gebruikt medicijnen tegen depressie die selectieve MAO-A-remmers en niet-selectieve MAO-remmers worden genoemd.
U heeft een tumor in de bijnier
Uw lichaam maakt te veel cortisol aan (syndroom van Cushing)
Uw schildklier werkt te snel
U heeft ooit maligne neurolepticasyndroom gehad
U heeft ooit rabdomyolyse gehad
U heeft ooit huidkanker gehad of u heeft ongewone moedervlekken of vlekken op uw huid die niet door uw arts zijn bekeken

Lees de bijsluiter van Lecigon goed door om te lezen in welke andere gevallen u direct contact moet opnemen met uw behandelend arts.

Hoe moet Lecigon worden bewaard?

- Het is belangrijk geneesmiddelen buiten het zicht en bereik van kinderen te houden
- Bewaar de cassettes in de koelkast (2–8 C°). Gebruik het geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. De houdbaarheidsdatum vindt u op het etiket van de doos na “EXP/ Te gebruiken tot”
- Bewaar ongebruikte cassettes in de doos ter bescherming tegen licht
- Een cassette met gel kan maximaal 24 uur worden gebruikt nadat deze uit de koelkast gehaald is
- De cassettes zijn uitsluitend bestemd voor éénmalig gebruik
- De gel kan een beetje geel of rood kleuren dichtbij de houdbaarheidsdatum. Dit heeft geen invloed op de kwaliteit van het geneesmiddel

Dosering

De arts bepaalt uw doses door te kijken naar uw eerdere medicatie. Het kan nodig zijn om de doses nog wat aan te passen tijdens de eerste paar weken van de behandeling. Meestal wordt er een grote dosis toegediend in de ochtend (ochtenddosis). Zo krijgt u snel de goede hoeveelheid geneesmiddel in uw bloed. Hierna wordt er steeds een kleine dosis (continudosis) gegeven tijdens de uren dat u wakker bent. Meestal wordt de continudosis ongeveer 16 uur gegeven, maar soms kan uw arts besluiten om het geneesmiddel 24 uur per dag te geven. Als het nodig is, kunnen er ook extra doses worden gegeven. Voor sommige patiënten kan het nodig zijn de continudosis tijdens de dag hoger of lager te maken. De arts praat met u over hoe en wanneer u extra doses krijgt en of de dosis tijdens de dag veranderd moet worden.




Over LecigonSupport

Het is belangrijk dat u zich zeker voelt over uw behandeling. Daarom is er na ontslag uit het ziekenhuis een ondersteunende dienst waar u gebruik van kunt maken: LecigonSupport. Dit is een zorgprogramma dat u ondersteunt in uw thuissituatie met een 24-uurservice en de inzet van speciaal opgeleide Lecigonverpleegkundigen. Dit complete pakket van zorg wordt uitgevoerd door Eurocept Homecare.

Als de behandeling van start gaat, bent u automatisch aangemeld voor het zorgprogramma LecigonSupport. Uw behandelend arts zal u tijdens opname in het ziekenhuis optimaal op de medicatie instellen en u tijdens de hele instelperiode begeleiden. Een gespecialiseerde Lecigonverpleegkundige zal daarbij ondersteuning bieden en is ook beschikbaar voor u in de thuissituatie. Voor vragen of ondersteuning kunt u, of uw verzorger, rechtstreeks contact opnemen met LecigonSupport.

De belangrijkste kenmerken van LecigonSupport vindt u terug in onderstaande afbeelding.

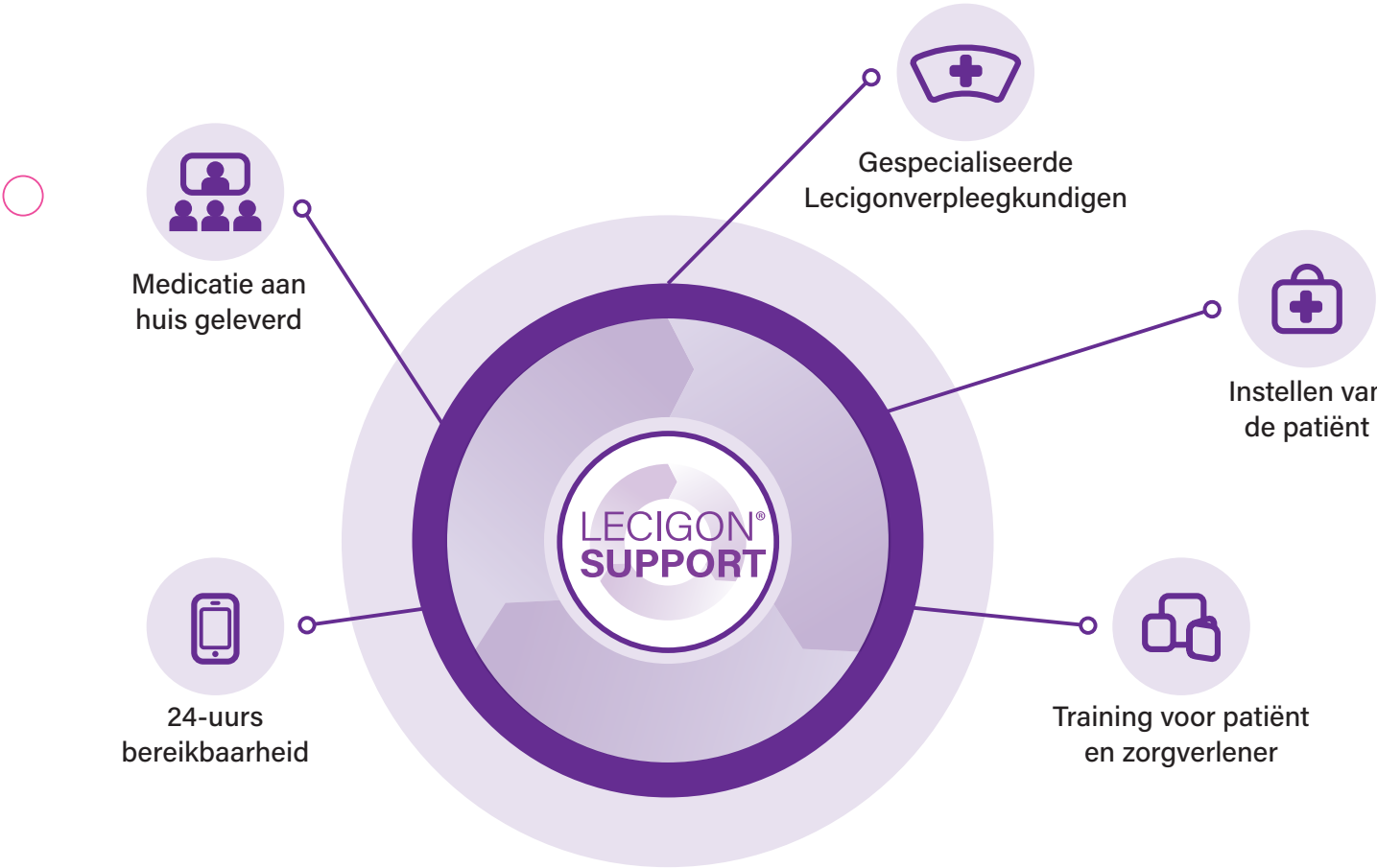


Test- & instelperiode

De neussonde

Eerst zal tijdens een testperiode gekeken worden hoe u op dit geneesmiddel reageert. Dit vindt in de meeste gevallen plaats in het ziekenhuis en wordt meestal gedaan door middel van een tijdelijk slangetje dat via de neus in de dunne darm uitkomt (neussonde).

Aan deze sonde wordt de pomp gekoppeld. In veel gevallen zal deze sonde op de afdeling radiologie of endoscopie worden geplaatst. Na de plaatsing van deze neussonde kan meteen gestart worden met de behandeling. De dosering wordt door uw behandelaar berekend. Hierbij wordt de overige medicatie voor de ziekte van Parkinson gestopt. De duur van de testperiode is in overleg met uw behandelend arts. In sommige gevallen kunt u thuis verder met de testfase. Tijdens deze testperiode wordt u begeleid door uw Parkinsonverpleegkundige en door de verpleegkundige van LecigonSupport.

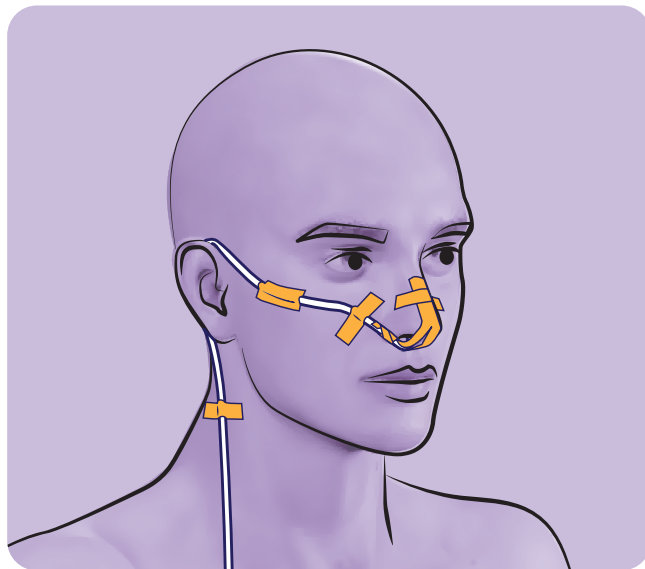

Neussonde

Let op!

Als u reeds een PEG-J sonde heeft, ziet de instelperiode er anders uit. In de meeste gevallen duurt het instellen 2 dagen. In overleg met uw arts wordt besloten of u wordt opgenomen of 's avonds naar huis kunt.




PEG-J sonde

Als blijkt dat de medicatie goed werkt, kan worden overgegaan op een permanente behandeling met Lecigon. Dit betekent dat u wordt ingepland voor een korte operatie om de PEG-J sonde te plaatsen. De PEG-J sonde is een slangetje dat door de buikwand naar de maag gaat en via de maag in de dunne darm komt. Aan de buitenkant wordt de sonde aan de pomp gekoppeld. Op de pomp wordt een cassette met het geneesmiddel in gelvorm geplaatst. Dit zijn (deels) dezelfde werkzame stoffen als in uw tabletten, alleen wordt het nu anders toegediend.

De avond voor de operatie wordt u nuchter gehouden. U krijgt een infuus met antibiotica om een mogelijke infectie te voorkomen. Voorafgaand aan de operatie krijgt u een licht slaapmiddel. U hoeft niet onder narcose. De maag-, darm-, en leverarts (MDL-arts) maakt een gaatje in de buikwand net onder de ribbenboog en gaat dan door de maagwand. Het slangetje wordt naar de twaalfvingerige darm gebracht. Het andere uiteinde zit aan de buitenkant van uw lichaam en kan worden aangesloten op de pomp.

Na het plaatsen van de PEG-J sonde blijft u nog ter observatie in de instelling. Tijdens de opname oefent u (eventueel samen met een verzorger) hoe de pomp bediend moet worden en hoe u de PEG-J sonde verzorgt. In overleg met uw arts kan de behandeling op elk moment worden gestopt. De PEG-J sonde wordt dan verwijderd waarna het gaatje in de maag en buikwand zal dichtgroeien.

Om de behandeling thuis goed te laten verlopen, kunt u gebruiken maken van LecigonSupport. Er is een verpleegkundige van LecigonSupport beschikbaar om instructies te geven en vragen te beantwoorden. Bij problemen met de pomp kunt u 24 uur per dag, 7 dagen per week, telefonisch contact opnemen met LecigonSupport van Eurocept Homecare. Het nummer is 0800-0200300.

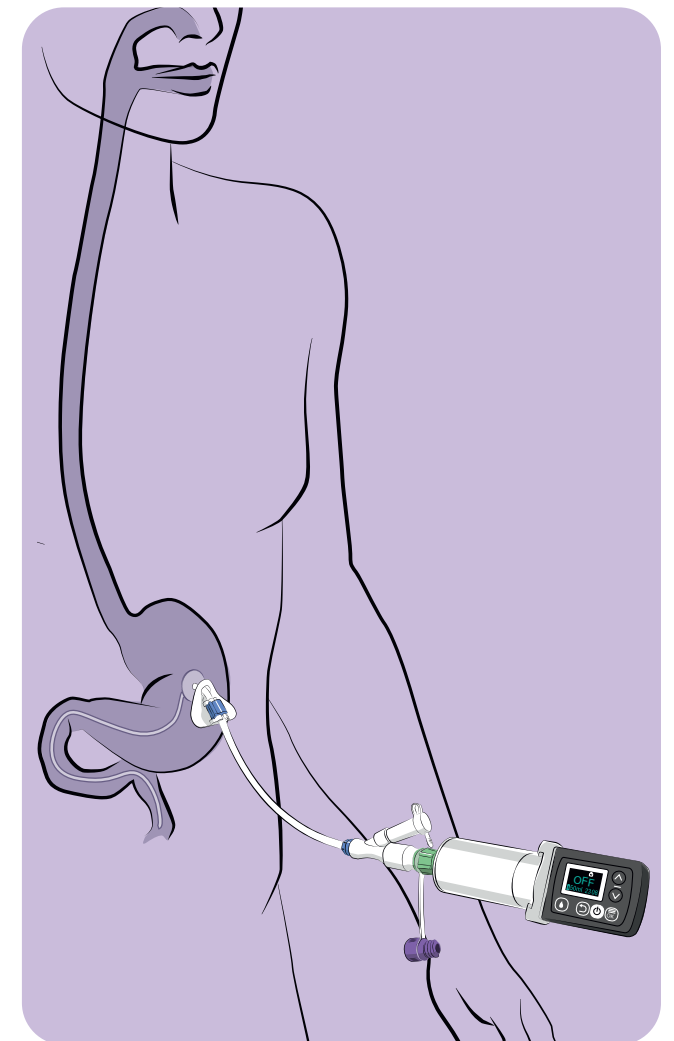

PEG-J Sonde

PEG-J verzorging

Direct na de ingreep

De dagelijkse verzorging van de PEG-J sonde is erg belangrijk om de kans op problemen te verminderen. Het is vooral belangrijk om de opening in de buik regelmatig en goed schoon te maken. Hieronder kunt u lezen hoe u dit moet doen.

De behandeling met Lecigon kan meestal direct na het plaatsen van de PEG-J sonde worden gestart. De MDL-arts kan u hierover meer vertellen. Voor de toediening van Lecigon is het belangrijk om vanaf de eerste dag de binnensonde elke dag 1 maal met lauw kraanwater door te spoelen en de buitensonde 2 maal per week met lauw kraanwater door te spoelen. Dit is nodig om verstopping van de sondes te voorkomen. Het doorspoelen hoort bij de vaste stappen die u volgt bij het uitschakelen van de pomp voor de nacht (zie hoofdstuk 'De Crono® LECIG-pomp' onder het kopje 'De pomp uitschakelen voor de nacht', stappen 8, 9 en 10). Krijgt u 24 uur per dag Lecigon toegediend, dan is spoelen van de binnensonde niet nodig.

Dagelijkse verzorging gedurende de eerste 10 dagen

Tijdens de eerste 7 tot 10 dagen na plaatsing van de PEG-J sonde (aantal dagen hangt af van de regels van uw ziekenhuis) moet het wondverband eenmaal per dag worden verwisseld op een hygiënische manier. Dit zijn de stappen die u moet volgen om de PEG-J sonde tijdens de eerste dagen na plaatsing elke dag te verzorgen:


1. Desinfecteer uw handen met water en zeep en trek wegwerphandschoenen aan. Verwijder het verband.
2. Het is belangrijk dat het fixatieplaatje vast blijft zitten en de PEG-J sonde niet wordt gedraaid.
3. Kijk of de huid rood of opgezwollen is, of de wond lekt en of u pus ziet. Vertel het aan de behandelend arts als u één van deze dingen ziet.
4. Maak de opening schoon met een licht vochtig gaasje met warm water en werk daarbij van binnen naar buiten. Zorg ervoor dat de huid om de wond zo droog mogelijk blijft.
5. Breng een nieuw verband aan. Maak de sonde aan het verband vast met tape.

Let op!


Gebruik geen ontsmettingsmiddelen zoals Iso-Betadine®, Braunol (bevat povidonjodium) of Octanosept® (bevat octenidinedihydrochloride fenoxylethanol). De stoffen in deze middelen zijn niet goed voor de sonde.

Dagelijkse verzorging van de PEG-J sonde en uw stoma na de eerste 10 dagen


Als uw wond genezen is, moet u de PEG-J sonde en de stoma elke dag op de volgende manier verzorgen: was eerst uw handen met water en zeep. Volg daarna de stappen in de afbeeldingen hieronder.

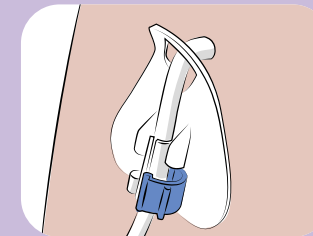


1. Open de clip op het uitwendige fixatieplaatje en maak de PEG-slang los.

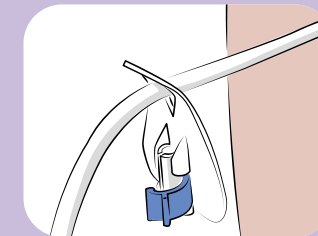


2. Maak het fixatieplaatje los van de stoma. Maak de stoma, het fixatieplaatje en de PEG-slang schoon met water.

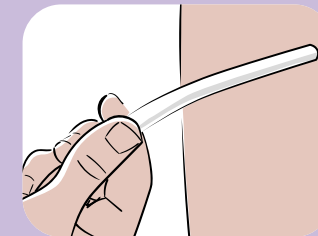


3. Schuif de PEG-slang voorzichtig en loodrecht 4-6 cm de stoma in (niet draaien) en weer uit. Maak de slang droog.

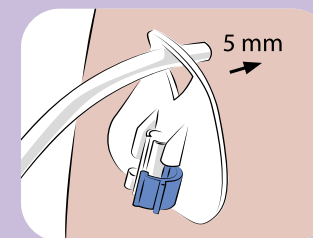

4. Plaats het fixatieplaatje onder lichte spanning weer terug. Let er daarbij op dat de afstand tussen de huid en het fixatieplaatje 0,5 tot 1 cm is.

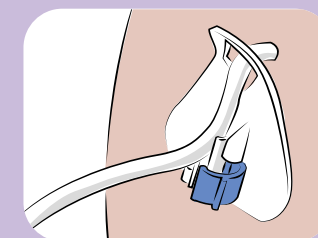

5. Leg de PEG-slang in de groef en sluit de clip om de slang te fixeren.

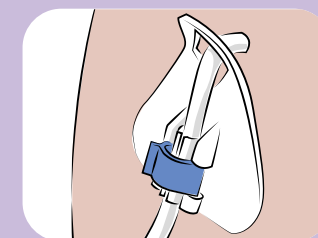

6. Controleer nogmaals de spanning door voorzichtig aan de slang te trekken.

Let op! De PEG-J sonde mag absoluut niet gedraaid worden, want hierdoor kan de binnensonde van zijn plaats raken en in de maag komen of in de knoop raken.

Problemen & oplossingen PEG-J sonde

De meest voorkomende klachten die kunnen ontstaan na plaatsing van de PEG-J sonde zijn buikpijn, ontsteking van de wond na de operatie, verdikte littekens na de operatie, een vervelend gevoel in de buik, klachten die te maken hebben met het inbrengen van de sonde, zoals pijn in de mond of keel, moeite met slikken, inwendige bloeding, overgeven, gezwollen buik en gevoelens van angst. Neem bij vragen altijd contact op met uw behandelend arts of met LecigonSupport (0800-0200300).

1. Verstopping van de sonde

Een verstopping van de sonde kan verschillende oorzaken hebben, zoals niet regelmatig doorspoelen, te weinig kraanwater gebruiken bij het doorspuiten of een knik in de binnensonde.

Oplossing: Spuit de binnensonde door met 20 ml lauw kraanwater. Als dit niet helpt, kunt u contact opnemen met de verpleegkundige van het zorgprogramma LecigonSupport via telefoonnummer 0800-0200300.

2. Lekkage via de opening

Door wat speling tussen de PEG-J sonde en de insteekopening is lichte lekkage van maaginhoud altijd mogelijk.

Oplossing: Tussen het fixatieplaatje en de huid moet 0,5 tot 1 cm ruimte zitten. Zorg er daarom voor dat het fixatieplaatje niet te strak of te los zit. Maak de huid rondom de opening schoon. Schuif vervolgens het fixatieplaatje op de goede plaats en controleer of er nog lekkage is. Wanneer de lekkage niet stopt, kunt u contact opnemen met het zorgprogramma LecigonSupport via telefoonnummer 0800-0200300.

3. Drukplek rondom de opening (rood, pijnlijk, open huid)

Roodheid van de huid rondom de stoma met een doorsnede van minder dan 5 mm is normaal en hoeft niet te wijzen op een wondinfectie. Aanbevolen wordt om de roodheid van de huid goed in de gaten te houden en eenmaal per dag te controleren.

Oplossing: Het fixatieplaatje kan te strak op de huid zitten. Schuif het fixatieplaatje losser, zodat er een ruimte van 0,5 tot 1 cm ontstaat tussen de huid en het fixatieplaatje. Neem ook direct contact op met uw behandelend arts.

4. Irritatie van de huid rondom de opening

Oplossing: Als de huid rondom de opening roder, pijnlijker of dikker wordt of als de lekkage erger wordt, neem dan contact op met uw behandelend arts.

5. Licht bloeden van de opening

Oplossing: Meestal wordt het licht bloeden veroorzaakt door wild vlees (abnormaal littekenweefsel). U kunt het bloeden stoppen door met een gaasje voorzichtig op de opening te drukken. Neem ook contact op met uw behandelend arts.

6. Andere klachten, zoals buikpijn, overgeven, diarree of ontstekingsverschijnselen

Oplossing: Neem contact op met uw behandelend arts.

De Crono® LECIG-pomp

Lecigon wordt afgegeven via een draagbare pomp (de Crono® LECIG-pomp) die vastzit aan de PEG-J sonde. Het geneesmiddel zit in de cassette die aan de pomp zit. De afmetingen van de pomp zijn lengte 84mm x breedte 55mm x hoogte 42mm. De pomp geeft steeds een vastgestelde dosis af gedurende de dag, waardoor de hoeveelheid van het medicijn in uw bloed de hele dag hetzelfde blijft. Hierdoor zijn sommige bijwerkingen, waaronder bijwerkingen die invloed hebben op bewegen, mogelijk minder erg dan bij medicijnen die u moet doorslikken.

In dit hoofdstuk leest u welke stappen u elke dag moet uitvoeren om ervoor te zorgen dat de pomp goed werkt. Dit zijn de algemene stappen, maar het kan zijn dat er voor u aangepaste stappen nodig zijn. In dat geval kunt u samen met uw Lecigonverpleegkundige een aangepast stappenplan maken. Dit aangepaste stappenplan krijgt u dan na de test- en instelperiode mee naar huis.




De Crono® LECIG-pomp

De pomp voorbereiden in de ochtend
Voer elke ochtend de stappen hieronder uit:

1. Sluit een nieuwe cassette op de pomp aan.



Plaats de cassette recht op de pomp.

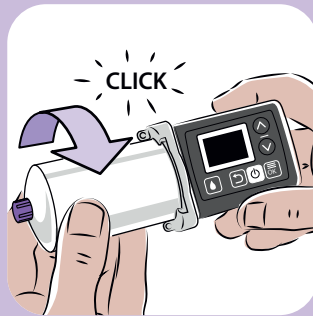


Draai de cassette om deze aan de pomp vast te maken.




Verwijder het plastic afsluitdopje.


2. Sluit de cassette en de pomp aan op de PEG-J sonde (zonder verlengslang).

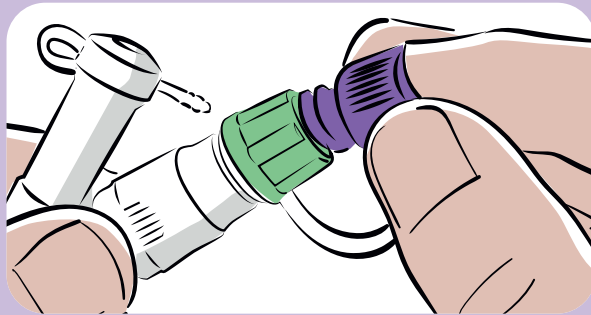

Schroef het paarse dopje van de PEG-J sonde af.

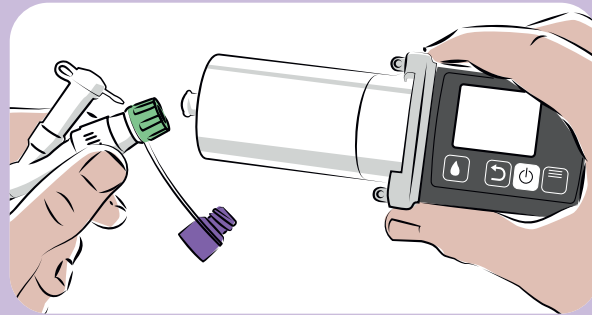

Maak de cassette vast aan de PEG-J sonde. (groene uiteinde van de Y-connector)

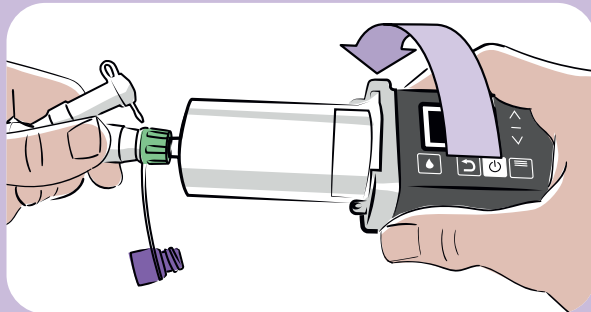

Houd daarbij met één hand de Y-connector van de PEG-J sonde vast en draai de cassette en de pomp met de andere hand voorzichtig met de klok mee op de Y-connector van de PEG-J sonde.

BELANGRIJK: Draai alleen de cassette en de pomp (niet de PEG-J sonde en Y-connector)


Starten van de pomp en afgeven van de ochtenddosis
Voer de stappen hieronder uit om de pomp in de ochtend te starten:




1. Druk op een toets (maakt niet uit welke) om het scherm in te schakelen.



2. Druk op de **AAN/UIT**-toets en houd deze ingedrukt om de pomp op te starten.

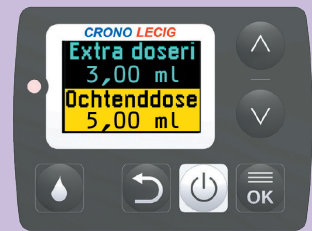

3. Druk op de **DRUPPEL**-toets en houd deze ingedrukt.

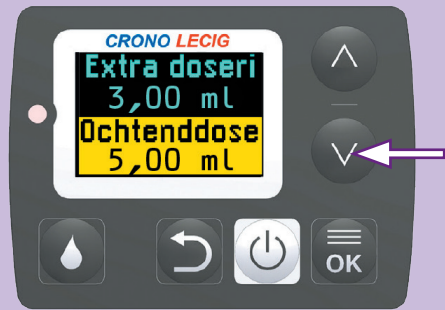

4. Gebruik de onderste **PIJL**-toets om in het menu "Ochtenddosis" te selecteren. Druk vervolgens op de **DRUPPEL**-toets en houd deze ingedrukt. De pomp zal nu de ochtenddosis gaan afgeven.


Werkwijze van de pomp tijdens de dag

Zodra de pomp de ochtenddosis helemaal heeft afgegeven, gaat de pomp automatisch over op het afgeven van de continudosis tijdens de rest van de dag. Hieronder leest u hoe u gemakkelijk kunt wisselen tussen de geprogrammeerde doorstroomsnelheden voor continue afgifte (F1, F2, F3):

Dit kan bijvoorbeeld voorkomen wanneer u de pomp 24 uur aan hebt en de nachtdosering lager is dan overdag.

Continudosis (CD)

Zodra de pomp de ochtenddosis volledig heeft toegediend, gaat deze automatisch over op toediening van de continudosis tijdens de rest van de dag.

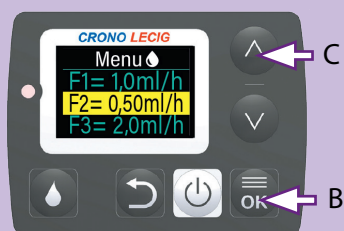

Wisselen tussen geprogrammeerde doorstroomsnelheden voor de continudosis (F1, F2, F3).


- A. Druk op een toets om het scherm in te schakelen.
- B. Wanneer de pomp aan staat, houd dan **OK** ingedrukt tot menu verschijnt.
- C. Kies de gewenste doorstroomsnelheid (F1-F3) met behulp van de **PIJLTOETSEN** (naar boven/beneden) en druk op '**OK**' om de keuze te bevestigen.

Extra doses (ED)

Voor toediening van een extra dosis.



- A. Druk op de **DRUPPEL**-toets en houd deze ingedrukt.

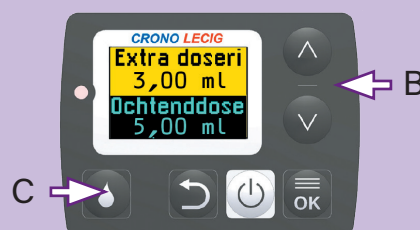


- B. Gebruik de pijltoetsen (naar boven/beneden) om in het menu "**Extra dosis**" te selecteren.
- C. Druk op de **DRUPPEL**-toets en houd deze ingedrukt. De pomp geeft nu de extra dosis.

De pomp uitschakelen voor de nacht


Voer de stappen hieronder uit om de pomp uit te schakelen voor de nacht:




1. Druk op een toets (maakt niet uit welke) om het scherm in te schakelen. Druk op de **AAN/UIT**-toets en houd hem ingedrukt. Op het scherm verschijnt de melding "**STOP**".
2. Druk op **OK** om de pomp te stoppen.

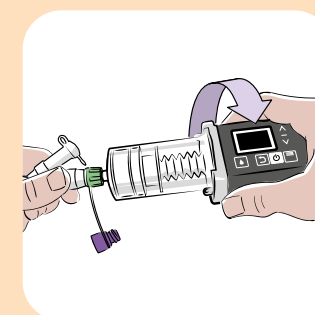


3. Draai de cassette van de PEG-J sonde af en sluit de sonde af met het paarse dopje (zorg ervoor dat de PEG-J sonde niet meedraait).

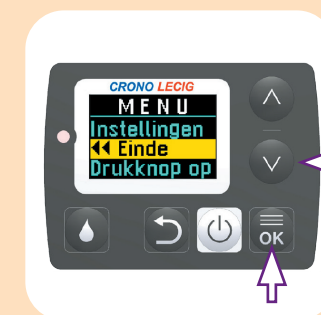


4. Druk op een toets om het scherm in te schakelen. Druk op de **OK** toets en houd hem ingedrukt. Op het scherm verschijnt het hoofdmenu.
5. Druk op de onderste pijltoets om "**EINDE**" te selecteren. Druk op **OK**.

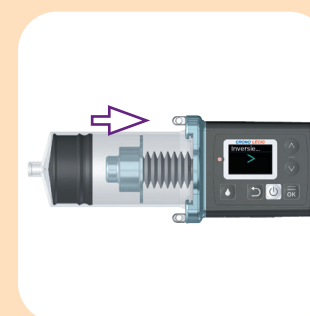


6. Na 10 seconden wordt de stamper ingetrokken (zie afbeelding). Dit proces duurt ongeveer 6 minuten.
7. In deze 6 minuten voert u de volgende stappen uit:

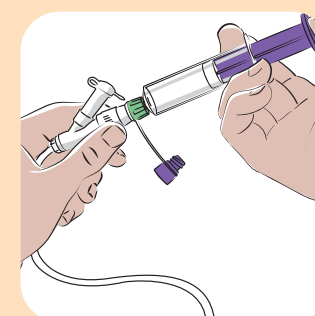

8. Spuit de binnensonde (medicatie) door met 20 ml water. Daarnaast kunt u de buitensonde (maag) 2x per week doorspuiten met 20 ml water.

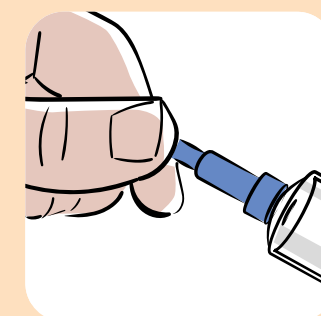


9. Zet nu de adapter voor de gastrale poort (maagtoegang) op de andere spuit (afb 10).

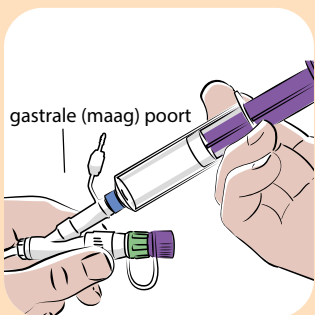

10. Open de gastrale poort van de PEG sonde, plaats de (ENFIT)-spuit en druk de zuiger rustig en niet te snel naar beneden om de PEG sonde door te spoelen. Sluit daarna de Y-connector weer af met het afsluitdopje.



11. Wanneer de stamper volledig is ingetrokken, verschijnt op het scherm **OFF**.

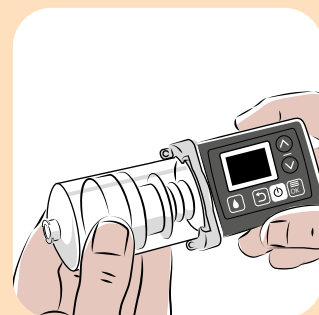

12. **VERWIJDER DE CASSETTE PAS WANNEER DE STAMPER VOLLEDIG INGETROKKEN IS EN OP HET SCHERM 'OFF' TE ZIEN IS.**

13. De pomp schakelt zichzelf automatisch uit.



14. Verwijder nu de cassette door deze los te draaien.




15. Geef oude cassettes mee aan de koerier als de nieuwe cassettes worden geleverd. Of breng medicijnafval terug naar uw apotheek of naar een inzamelplek voor klein chemisch afval.

Tussendoor stoppen en weer starten van de pomp

Als u de pomp tijdelijk wilt uitzetten, bijvoorbeeld omdat u wilt douchen, voer dan de stappen hieronder uit:

Tijdelijk onderbreken (bijv. voor het douchen) en opnieuw opstarten van de pomp

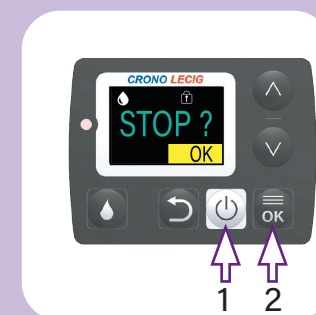


1. Druk op een toets (maakt niet uit welke) om het scherm in te schakelen. Druk op de **AAN/UIT**-toets en houd deze ingedrukt. Op het scherm verschijnt de melding **"STOP"**.
2. Druk op **OK** om de pomp te stoppen.



3. Op het scherm verschijnt de melding **"STOP"** en de pomp wordt gestopt.



4. Druk op een toets om het scherm in te schakelen. Druk op de **AAN/UIT**-toets en houd deze ingedrukt om de pomp te starten.
5. Op het scherm verschijnt de melding **"ON"**.

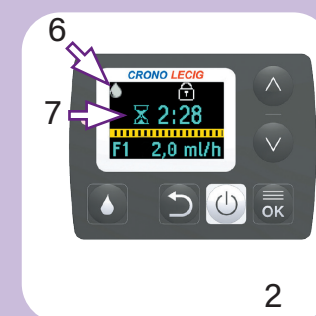

6. Het **DRUPPEL**-icoon op het scherm knippert om aan te geven dat de pomp loopt.
7. Het **ZANDLOPER**-icoon geeft de rest van de doorstroomtijd aan.


Einde van de toediening en uitschakelen van de pomp om een nieuwe cassette te plaatsen



1. Druk op een toets (maakt niet uit welke) om het scherm in te schakelen. Druk op de **AAN/UIT**-toets en houd deze ingedrukt. Op het scherm verschijnt de melding "STOP".
2. Druk op **OK** om de pomp te stoppen.



3. Druk op een toets om het scherm in te schakelen. Druk op de **OK**-toets en houd hem ingedrukt. Op het scherm verschijnt het hoofdmenu.
4. Druk op de onderste pijltoets om "EINDE" te selecteren. Druk op **OK** om te bevestigen.

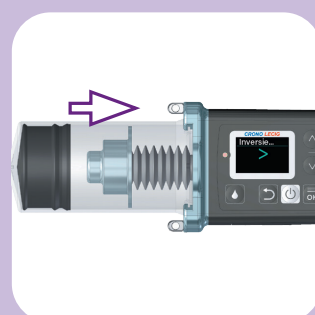

5. Na 10 seconden wordt de stamper ingetrokken. Dit proces duurt ongeveer 6 minuten.
6. Volg nu stap 1 en 2 van de werkwijze in de ochtend.
7. Ga nu naar punt 4 en 5 van "Tijdelijk onderbreken (bijv. voor het douchen) en opnieuw opstarten van de pomp" hierboven.





Reizen

U kunt gewoon met Lecigon reizen, maar in de eerste drie weken na de test- en instelperiode kunt u beter niet naar het buitenland gaan. In de meeste gevallen kunt u na drie weken gewoon op vakantie. Bespreek dit wel met uw behandelend arts.

Gekoeld bewaren

Lecigon is een medicijn dat koel bewaard moet worden bij een temperatuur tussen 2-8 °C. Bespreek met uw apotheker hoe u de cassettes met het medicijn koud kunt houden tijdens uw reis. Neem de cassettes daarom in ieder geval als handbagage mee in een koeltas of koelbox met genoeg koelelementen.

Gaat u met de auto op reis, dan kunt u het best een koelbox meenemen die u kunt aansluiten op een 12V-aansluiting in de auto.

Gaat u met het vliegtuig op reis, spreek dan voordat u vertrekt met de vliegmaatschappij af dat u cassettes met het medicijn meeneemt als handbagage. Doe dit al bij het boeken om ervoor te zorgen dat u geen problemen krijgt.

Neem tot slot ook vóór de reis contact op met het hotel/de accommodatie om er zeker van te zijn dat er daar een koeling is.

Voorraad Lecigon

Zorg ervoor dat u genoeg cassettes en ander materiaal bij u heeft voor uw hele vakantie en de eerste week nadat u weer thuis bent. De levering van deze voorraad kunt u afspreken met het zorgprogramma LecigonSupport via telefoonnummer 0800-0200300.

Het zorgprogramma kan de voorraad cassettes op uw vakantieadres in Nederland laten bezorgen. Voor het buitenland is dit niet mogelijk. Als u naar het buitenland reist, neem dan ook in overleg met uw arts Parkinsonmedicijnen mee die u kunt slikken, voor het geval er iets gebeurt waardoor u uw pomp niet kunt gebruiken. Neem ook extra spuiten, koppelstukjes en draagmaterialen mee.

Medicijnpaspoort

Bij het passeren van de douane op het vliegveld is het belangrijk een ingevuld medicijnpaspoort bij u te hebben. Deze heeft u ontvangen van de verpleegkundige van LecigonSupport. Hiermee kunt u gemakkelijk aantonen dat u Lecigon gebruikt voor de gevorderde ziekte van Parkinson. In het Nederlands, Engels, Spaans en Frans wordt uitgelegd wat Lecigon is en dat u dit geneesmiddel nodig heeft. Mocht u een nieuw exemplaar nodig hebben van het medicijnpaspoort, neem dan contact op met LecigonSupport via 0800-0200300.

Het is tevens belangrijk om ruim voordat u op reis gaat contact op te nemen met uw neuroloog of Parkinsonverpleegkundige, zodat het medicijnpaspoort ingevuld en ondertekend kan worden door uw arts.

**LecigonSupport 24-uurservice
vanuit het buitenland:**



+31 30 66 93 042

Problemen & oplossingen Crono® LECIG-pomp

1. De pomp werkt niet meer

Controleer eerst of de pomp aan staat. Controleer ook of de batterij nog werkt. Als het hier niet aan ligt, neem dan zo snel mogelijk contact op met de 24-uursdienst van LecigonSupport via telefoonnummer 0800-0200300. Als het probleem niet opgelost kan worden, wordt er zo snel mogelijk een nieuwe pomp geleverd.

2. De pomp geeft een foutmelding

Als de pomp een foutmelding geeft, ziet u een foutcode op het scherm en gaat het LED-lampje branden. Neem bij foutcode ER 2 t/m ER 11 direct contact op met LecigonSupport via 0800-0200300. Hieronder treft u de overige mogelijke foutmeldingen en welke handeling u het beste kunt uitvoeren om het op te lossen.

‘Hoge druk’

Een alarmsignaal ‘hoge druk’, betekent dat de pomp de medicijnen niet door de binnensonde kan toedienen. Het kan zijn dat het beschermdopje van de cassette niet is verwijderd. Mocht dit niet zo zijn, neem dan zo spoedig mogelijk contact op met LecigonSupport via 0800-0200300.

Foutmelding ‘OCCL’

De foutmelding ‘OCCL’ verschijnt bij een afsluiting van de sonde (slang). Controleer daarom of de PEG-J sonde geknikt is. Haal de knik uit de slang en spoel de slang daarna door. Als de foutmelding niet weggaat, neem dan direct contact op met LecigonSupport via 0800-0200300.

Foutmelding ‘BATT’

De foutmelding ‘BATT’ verschijnt als de batterij bijna leeg is. Vervang de batterij (dit kan meestal ook tijdens de eerstvolgende keer dat u een nieuwe cassette plaatst).

Vragen & antwoorden

Lecigon

Waarom wordt urine en zweet vaak geel?

Dit komt door entacapon. Probeer donkerdere kleuren te dragen als uw kleding verkleurt. Als het geneesmiddel in contact komt met meubels/kleding, was het dan onmiddellijk met water om vlekken te voorkomen.

Waarom is het medicijn geler dan normaal?

Neem contact op met u apotheek voordat u Lecigon gebruikt. Het kan zijn dat uw koelkast niet de juiste temperatuur heeft van 2-8 °C of omdat het geneesmiddel in de warmte heeft gestaan of omdat de datum is verlopen.

PEG-J sonde

Welke PEG-J wordt gewoonlijk gebruikt voor de behandeling met Lecigon?

Freka PEG van Fresenius Kabi en Freka J van Fresenius Kabi.

Wat is de lengte en de levensduur van de PEG-sonde?

De lengte is 30 cm en de levensduur is enkele jaren.

Kan ik reizen naar het buitenland?

Het is goed mogelijk te reizen met Lecigon. Geadviseerd wordt niet direct na de test- & instelperiode naar het buitenland te reizen. Uitgebreide informatie vindt u in het hoofdstuk ‘Reizen’ in deze brochure.

Hoe komt het dat mijn PEG-J sonde moeilijk doorspoelt?

Als er niet dagelijks of gedurende een langere periode niet gespoeld wordt, kan de PEG-slang voedselresten bevatten die zijn opgedroogd in het slangetje. Probeer een aantal keren door te spoelen met lauw water totdat de verstopping is verholpen. Mocht u wel dagelijks doorspoelen en toch deze problemen ondervinden, neem dan contact op met uw arts of LecigonSupport.

Wat moet ik doen als het spoelen van de binnensonde moeizaam gaat?

Probeer een aantal keren door te spoelen met lauw water totdat de verstopping is verholpen. Mocht dit niet het gewenste resultaat opleveren, neem dan contact op met uw arts of LecigonSupport via 0800-0200300.

Kan ik onder de douche of in bad met de PEG-J sonde?

7 tot 10 dagen (afhankelijk van het protocol van uw ziekenhuis) na plaatsing van de PEG-J sonde kunt u weer douchen, in bad gaan of zwemmen. De PEG-J sonde mag gewoon nat worden. U kunt hem ook met water en zeep schoonmaken. Zorg wel dat u na het schoonmaken alle zeepresten goed verwijdert om irritatie van de huid te voorkomen. Als u onder de douche of in bad wilt, moet u de pomp loskoppelen van de PEG-J sonde.

De pomp is namelijk niet waterdicht. Het is goed om na te gaan hoe lang het bij u duurt voordat u weer Parkinson-klachten krijgt (zoals stijfheid) als de pomp niet is aangesloten. Zo weet u hoe lang u de tijd heeft om te douchen, baden of zwemmen. Mogelijk heeft u een extra dosering nodig voordat de pomp wordt afgekoppeld.

Waarom verandert de PEG-J sonde van kleur?

De PEG-J sonde komt in aanraking met zowel medicijnen als maagsap. Verkleuring hierdoor is niet erg; u kunt de PEG-J sonde gewoon blijven gebruiken.

Cassette

Hoe kan ik de cassettes van Lecigon ontvangen?

De cassettes worden bij u thuisbezorgd op een datum en tijdstip in overleg met u. De cassettes worden verpakt in een doos, bestaande uit 7 cassettes.

Hoe moet ik de cassettes bewaren?

Bewaar de cassettes in de koelkast (2-8 °C) en gebruik de cassettes niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. De houdbaarheidsdatum vindt u op het etiket van de doos. Het is belangrijk de cassettes buiten het zicht en bereik van kinderen te houden. Bewaar ongebruikte cassettes in de doos om ze te beschermen tegen licht.

Hoe lang kan een cassette buiten de koelkast bewaard worden?

Een cassette met gel kan maximaal 24 uur nadat hij uit de koelkast is gehaald, worden gebruikt. De cassettes zijn uitsluitend bestemd voor éénmalig gebruik.

De gel in de cassette verandert van kleur, is dit normaal?

De gel kan een beetje geel of rood worden als de uiterste houdbaarheidsdatum dichterbij komt. Dit heeft geen invloed op de kwaliteit van Lecigon.

Notities

Ga naar www.lecigonsupport.nl

voor meer informatie over Lecigon, de pomp en LecigonSupport. Door de code '1357' in te voeren bij zowel 'gebruikersnaam' als 'wachtwoord', kunt u inloggen op het patiëntendeel van deze website.

Deze brochure is gemaakt door:

Centrafarm B.V.

Van de Reijtstraat 31-E
4814 NE Breda

LecigonSupport 24-uursservice:



0800-0200300



lecigon@eurocept.nl